

– Instrucciones de uso –

Descripción del Producto: Los Apósitos y Cuerdas Hidroconductoras de Vitále® están fabricados de una mezcla propia de fibras, proporcionando un apósito altamente absorbente y suave. Crean un entorno ideal para la herida y están indicados para el tratamiento de heridas con exudación moderada a fuerte, superficial o profunda. Los Apósitos Hidroconductoras de Vitále no están medicados.

La mezcla de fibras en los Apósitos Hidroconductoras de Vitále elevan, mantienen y exudan la transferencia, los residuos de la herida, las bacterias y los múltiples problemas médicos (MMP, por sus siglas en inglés) nocivos alejados del lecho de la herida. Existen múltiples mecanismos de acción que mueven fluidos: incluyendo capilares, hidroconductoras y electrostáticas. Los Apósitos Hidroconductoras de Vitále apoyan el proceso de cicatrización del cuerpo y ayudan a preparar el lecho de la herida de manera eficaz sin dañar el tejido de granulación. Los Apósitos Hidroconductoras de Vitále están esterilizados mediante esterilización gamma y no deben volver a esterilizarse.

Indicaciones:

Los Apósitos y Cuerdas Hidroconductoras de Vitále pueden usarse para el manejo de heridas agudas, incluyendo heridas quirúrgicas complejas y quemaduras de primer y segundo grado. También pueden usarse para heridas crónicas, incluyendo úlceras en las piernas, úlceras en el pie diabético y úlceras de presión (estadios II-IV).

Precaución:

- Se debe usar una capa de contacto no adherente en quemaduras, así como en heridas de bajo exudado, para evitar la adherencia al lecho de la herida.
- Las heridas deben revisarse y manejarse adecuadamente, bajo la dirección de un médico.

Contraindicaciones:

No usar si hay sangrado arterial. No indicado para condiciones de heridas secas o quemaduras de tercer grado.

Almacenamiento:

Los Apósitos y Cuerdas Hidroconductoras de Vitále deben almacenarse en un área fresca y seca. Los productos son estériles a menos que el envase esté abierto o dañado.

Aplicación:

1. Limpie y enjuague la herida de la manera habitual. La Solución Antimicrobiana Vitále para Heridas es ideal para esto, ya que ayuda a controlar la carga biológica y prepara el lecho de la herida para su curación.
2. (Apósitos) Coloque el Apósito Hidroconductor de Vitále sobre la herida húmeda. Si es necesario, dóblelo o córtelo para ajustarlo el tamaño de la herida; pueden utilizarse capas para heridas muy exudativas.
3. (Cuerdas) Enrolle la cuerda suavemente en heridas profundas dejando un extremo o "cola" para una fácil extracción.
4. En el caso de heridas ligeramente exudativas, humedezca el apósito con solución salina fisiológica.
5. Cúbralo con un apósito secundario o un vendaje de su elección.
6. Cambie el apósito cada 1-3 días, cuando se produce la saturación, o por lo menos cada 7 días.
7. Al cambiar el apósito, retire el apósito secundario y retire suavemente el apósito completo. Enjuague si es necesario.

– Línea de productos –

Número de catálogo:	Descripción:	Tamaño:	Apósitos por caja:
20800	Cuerdas Hidroconductoras Vitále		5
20822	Apósitos Hidroconductoras Vitále	2" x 2" (5cm x 5cm)	10
20844	Apósitos Hidroconductoras Vitále	4" x 4" (10cm x 10cm)	10
20845	Apósitos Hidroconductoras Vitále	4" x 5" (10cm x 12.5cm)	10



CellEra, LLC Cincinnati, OH
www.celleralc.com




Un solo uso



Esterilizados por irradiación



Mantenga seco

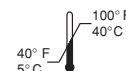

Temperatura Almacenaje